

Шлем текстильный MCScar 5-5 HD

Шлем текстильный маркированный по системе ЭЭГ-отведений 5-5 с идентификацией размера по цвету шва.

Артикул	Размер	Окружность головы
232950454	XL	60-66 см
494244367	XL/L	57-63 см
772584877	L	54-60 см
253566684	L/M	51-57 см
668163083	M	48-54 см
633196442	M/S	45-51 см
577581423	S	42-48 см



НАЗНАЧЕНИЕ

Для фиксации ЭЭГ-электродов на голове.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

- Шлем текстильный MCScar 5-5 HD,
- подбородник,
- эксплуатационная документация.

ОПИСАНИЕ

Шлем текстильный MCScar 5-5 HD – это текстильный шлем, промаркированный согласно международной системе ЭЭГ-отведений 5-5. Шлем предназначен для использования с чашечными электродами MCScar-T-HD и MCScar-T-MR. Текстильный шлем изготовлен из эластичного материала, сохраняющего форму и размер. Шлем обеспечивает точное положение электродов на голове без дополнительных измерений и регулировки. Большие отверстия предусмотрены для вентиляции и обеспечения доступа к электродам и коже пациента. Шлем фиксируется на голове с помощью подбородника или нагрудного ремня. Идентификация размера шлема осуществляется по цвету шва.




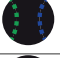
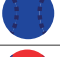
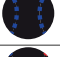

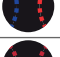





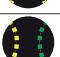





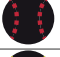


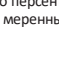
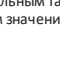


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал шлема	неопрен
Система расположения электродов	5-5
Количество посадочных мест для электродов	до 257
Совместимые модели электродов	MCScap-T-HD, MCScap-T-MR
Цвет	чёрный
Масса изделия (масса нетто)	< 40 г
Масса изделия в упаковке (масса брутто)	< 40 г



Размерный ряд шлемов MСScар

Размер шлема	Окружность головы	Цвет основы для цветных шлемов	Цвет шва для черных шлемов	Рекомендовано для*	Размер подбородника/нагрудного ремня
XL	60-66 см	зелёный 	 зелёный	взрослые	взрослый
XL/L	57-63 см	зелёный и синий 	 зелёный и синий	взрослые	
L	54-60 см	синий 	 синий	взрослые (большинство)	
L/M	51-57 см	синий и красный 	 синий и красный	подростки, взрослые	
M	48-54 см	красный 	 красный	дети, подростки	детский
M/S	45-51 см	красный и жёлтый 	 красный и жёлтый	дети до 5 лет	
S	42-48 см	жёлтый 	 жёлтый	дети до 2 лет	
S/XS	39-45 см	жёлтый и зелёный 	 жёлтый и зелёный	дети до 1 года	
XS	36-42 см	зелёный 	 зелёный	дети до 4 месяцев	для новорождённых
Inf I	32-36 см	синий 	 синий	новорождённые до 1 месяца	
Inf II	28-32 см	красный 	 красный	новорождённые, недоношенные	
Inf III	24-28 см	жёлтый 	 жёлтый	новорождённые, недоношенные	

* Согласно медианному значению размеров головы детей по перцентильным таблицам ВОЗ <http://www.who.int/childgrowth> и ГОСТ Р 56620.2-2015/ISO/TR 7250-2:2010. В каждом конкретном случае размер шлема следует выбирать, руководствуясь из мерным значением окружности головы пациента.