

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Шлем текстильный MCScar 10-20 с кольцами

Маркированный текстильный шлем с предустановленными фиксирующими кольцами в соответствии с системой 10-20.

Артикул	Размер	Окружность головы
033-0-225	XL	60-66 см
033-0-226	XL/L	57-63 см
033-0-227	L	54-60 см
033-0-228	L/M	51-57 см
033-0-229	M	48-54 см
033-0-230	M/S	45-51 см
033-0-231	S	42-48 см
033-0-232	S/XS	39-45 см
033-0-233	XS	36-42 см



СОСТАВ КОМПЛЕКТА

- Шлем текстильный MCScar 10-20 с кольцами,
- подбородник,
- эксплуатационная документация.


ОПИСАНИЕ

MCScar 10-20 с кольцами – это маркированный текстильный шлем с 20 фиксирующими кольцами, размещенными согласно международной системе 10-20. Кольца в шлеме предназначены для установки точечных электродов типа MCScar-E. Текстильный шлем изготовлен из эластичного материала, сохраняющего форму и размер. Шлем обеспечивает точное положение электродов на голове без дополнительных измерений и регулировки. Большие отверстия предусмотрены для вентиляции и обеспечения доступа к электродам и коже пациента. Шлем фиксируется на голове с помощью подбородника или нагрудного ремня. Идентификация размера шлема осуществляется по цвету шва.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал шлема	неопрен
Материал фиксирующих колец	полиуретан
Количество фиксирующих колец	20
Система расположения электродов	10-20
Совместимые модели электродов	MCScar-E
Цвет	чёрный / цветной (опционально)
Масса изделия (масса нетто)	< 80 г
Масса изделия в упаковке (масса брутто)	< 80 г

Схема размещения колец

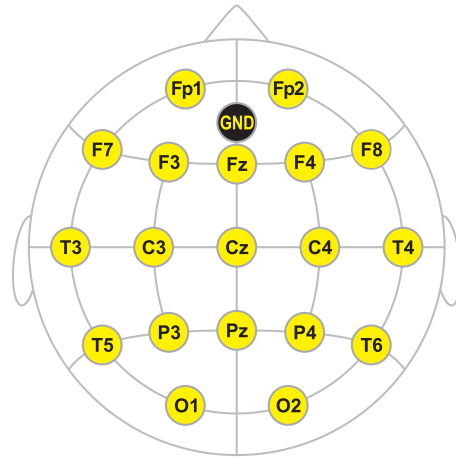

#10M20

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ШЛЕМОВ MCSCAP

Размер шлема	Окружность головы	Цвет основы для цветных шлемов	Цвет шва для черных шлемов	Рекомендовано для *	Размер подбородника/нагрудного ремня
XL	60-66 см	зеленый	зелёный	взрослые	взрослый
XL/L	57-63 см	синий/зеленый	зелёный и синий	взрослые	
L	54-60 см	синий	синий	взрослые (большинство)	
L/M	51-57 см	красный/синий	синий и красный	подростки, взрослые	
M	48-54 см	красный	красный	дети, подростки	детский
M/S	45-51 см	желтый/красный	красный и жёлтый	дети до 5 лет	
S	42-48 см	желтый	жёлтый	дети до 2-х лет	
S/XS	39-45 см	зеленый/желтый	жёлтый и зелёный	дети до 1 года	
XS	36-42 см	зеленый	зелёный	дети до 4-х месяцев	
Inf I	32-36 см	синий	синий	новорождённые до 1-го месяца	для новорождённых
Inf II	28-32 см	красный	красный	новорождённые, недоношенные	
Inf III	24-28 см	жёлтый	жёлтый	новорождённые, недоношенные	

* Согласно медианному значению размеров головы детей по перцентильным таблицам ВОЗ <http://www.who.int/childgrowth> и ГОСТ Р 56620.2-2015/ISO/TR 7250-2:2010.

Перед обследованием необходимо измерить окружность головы пациента и выбрать шлем соответствующего размера. Правильный размер шлема важен для качественной регистрации ЭЭГ и комфорта пациента.